

Indicações de utilização:

HIIGIENE DAS PÁLPEBRAS

BLEPHACLEAN destina-se à higiene diária das pálpebras, especialmente:

- Se tem uma pele, pálpebras ou olhos sensíveis,
- Se necessita de remover poeiras, pólen ou secreções das suas pálpebras. Tal poderá fazer parte dos cuidados a ter quando tem uma alergia ou infeção nos seus olhos,
- Se tem uma inflamação ou infeção nas pálpebras tal como blefarite, disfunção das glândulas de Meibomius, terçolho ou chalázio. Estas condições podem causar sintomas de secura ocular tais como, comichão, sensação de areia, dor e/ou vermelhidão nos olhos,
- Quando necessita de limpar as pálpebras antes de procedimentos oftalmológicos, tais como injeções terapêuticas nos seus olhos (injeções intravítreas), cirurgia laser nos olhos (LASIK ou PRK) ou cirurgia da catarata. Como é bem tolerado, BLEPHACLEAN pode também ser utilizado após a cirurgia, tendo em consideração as indicações do seu médico ou oftalmologista.

BLEPHACLEAN mantém as suas pálpebras limpas, respeitando ao mesmo tempo a pele em redor dos seus olhos e as suas bactérias naturais.

Antes de uma cirurgia ocular, utilize **duas vezes por dia** durante 5 dias ou como indicado pelo seu médico ou farmacêutico.

Para as outras situações, utilize **duas vezes por dia** de manhã e à noite durante 3 semanas e depois uma vez por dia durante 3 meses ou como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Algumas situações a nível das pálpebras são crónicas e poderá ter de manter a higiene das pálpebras durante um longo período de tempo.

Não é necessário enxaguar após a utilização.


BLEPHACLEAN pode ser utilizado em crianças a partir dos 3 meses de idade.

O produto foi testado sob controlo oftalmológico.


Se utiliza lentes de contacto: retire as lentes antes de utilizar BLEPHACLEAN.

Instruções de utilização:

1. Higiene das pálpebras e pestanas: Abra a saqueta e desdobre o toalhete que se encontra no seu interior. Com o olho fechado, aplique delicadamente o toalhete nas pálpebras e na base das pestanas. Massageie cuidadosamente as pálpebras com pequenos movimentos circulares, removendo com suavidade quaisquer crostas, secreções ou maquilhagem.

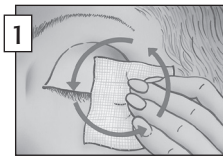

2. Higiene dos bordos das pálpebras: Em frente a um espelho, abra cuidadosamente a pálpebra, puxando ligeiramente as pestanas. Esfregue delicadamente o bordo palpebral com um toalhete enrolado.

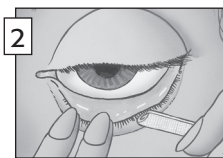

Repita os passos acima no outro olho utilizando um toalhete novo.

Precauções de utilização e advertências:

Apenas para aplicação na pele, não aplique diretamente nos olhos. Não utilize se tem alergia a qualquer um dos componentes. BLEPHACLEAN é um produto estéril, **para uma utilização única**. Não utilize novamente, pois tal pode fazer com que os toalhetes atuem menos bem e pode aumentar o risco de infeção. Não utilize o toalhete se a saqueta estiver aberta ou danificada. A cor do toalhete (loção) pode variar. Tal é uma situação normal e deve-se aos extratos naturais da planta. Se os seus sintomas se agravarem deixe de utilizar BLEPHACLEAN e contacte o seu médico ou farmacêutico. Não utilize após o prazo de validade indicado na embalagem exterior e na saqueta. O prazo de validade refere-se ao produto na sua embalagem intacta e conservado corretamente. Os toalhetes devem ser rejeitados no lixo doméstico após a utilização.

Conservar entre 8 e 25°C.

MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Possíveis efeitos adversos:

Foram notificados os seguintes eventos com BLEPHACLEAN: sensação de queimadura ou comichão durante alguns minutos após a utilização, vermelhidão ou inchaço das pálpebras, reações alérgicas.

Descrição do produto:

Toalhete estéril, impregnado com uma loção.

A loção contém: Capriloil glicina, Hialuronato de sódio, PEG 8, Poloxamero 184, Polissorbato 20, Propilenoglicol, extrato de hidrocotil (propilenoglicol, extrato de *Centelha asiática* e água), Complexo-sebo-regulador sem conservantes (propilenoglicol, extrato de raiz de *Iris florentina*, sulfato de zinco, PPG-5 Ceteth 20 e palmitato de retinol (Vitamina A), álcool e água), PEG 6 glicérideos caprílicos/cápricos (i.e. Macrogol 6 glicerol caprilocaprato), Fosfato dipotássico, Hidróxido de sódio, Dihidrogenofosfato de potássio, Água purificada.

Data de revisão das instruções de utilização: Fevereiro 2016

Distribuidor:

Théa Portugal, S.A.
Rua Pedro Álvares Cabral, 24 – 5ªF,
2670-391 Loures, Portugal



Fabricante
Laboratoires THEA

12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
França



Conservar entre 8 e 25°C



Não reutilizar



Não utilizar se a embalagem (saqueta) estiver danificada



Esterilização por irradiação



Consultar as instruções de utilização



Advertência



Prazo de validade



Lote

